



LUNEX TOUCH

МАССАЖЕР ШЕИ
OL0838



Руководство пользователя

Версия 1.0

Вся информация актуальна на момент печати

Содержание

Важные меры безопасности	2
Порядок эксплуатации	5
Ограничения гарантии	6
Спецификация	7
Кнопки управления	8
Состав массажера	8
Хранение и обслуживание	9
Контактная информация	10

Важные меры безопасности

Важные указания по безопасности:

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

Полностью прочитайте инструкцию перед использованием массажера.

Внимание! Во избежание поражения электрическим током выполняйте следующие правила:

- Всегда отключайте массажер от электрической сети сразу после его использования или перед чисткой.
- НЕ трогайте массажер, который упал в воду. Немедленно отключите его от электрической сети.
- НЕ используйте массажер во время купания или приема душа.
- НЕ ставьте и не храните массажер там, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.
- НЕ ставьте и не роняйте массажер в воду или другую жидкость.
- Никогда не используйте булавки или другие металлические крепежи с этим массажером.
- Храните массажер в сухом месте, не допускайте его эксплуатацию в помещениях с высокой влажностью.

Внимание! Для снижения риска возникновения ожогов, поражения электрическим током, пожара или травм:

- НЕ следует оставлять работающий массажер без присмотра. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не используете массажер, или перед установкой или снятием частей приспособлений.
- Необходим тщательный контроль при использовании массажера в помещениях с детьми или инвалидами.
- Используйте массажер только по его прямому назначению, как описано в данном руководстве.
- НЕ пользуйтесь массажером, если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает должным образом, если он упал или был поврежден, или упал в воду.
- Держите шнур питания вдали от нагретых поверхностей.
- НЕ вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.

Важные меры безопасности

Внимание! Для снижения риска возникновения ожогов, поражения электрическим током, пожара или травм:

- НЕ используйте массажер в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля (спрея) или там, где присутствует чистый кислород.
- НЕ используйте массажер под одеялом или подушкой. Иначе массажер перегреется, что может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- НЕ переносите массажер держась за шнур питания и не используйте шнур в качестве ручки.
- Чтобы полностью отключить питание, поставьте все выключатели в положение "ВЫКЛ", и только потом выньте вилку из розетки.
- Данный массажер предназначен для личного использования и не может использоваться для профессиональных целей.
- Не используйте массажер вне помещений.
- Данный массажер не является медицинским оборудованием. Он предназначен только для обеспечения разминающего массажа.

Проконсультируйтесь с Вашим врачом перед использованием этого массажера, если:

- Вы беременны
- У Вас есть кардиостимулятор
- У Вас есть какие-либо вопросы относительно Вашего здоровья

Важные меры безопасности

Важные указания по безопасности:

- НИКОГДА не оставляйте массажер без присмотра, особенно если в доме есть дети.
- НЕ используйте массажер более 15 минут одновременно.
- Бесперывное использование массажера может привести к его перегреву и уменьшению срока службы. Если массажер перегрелся, прекратите массаж и дайте ему остыть перед новым использованием.
- НИКОГДА не используйте массажер непосредственно на опухших или воспаленных участках тела или при кожном раздражении.
- НЕ используйте этот массажер в качестве замены полноценной медицинской помощи.
- НЕ используйте массажер перед сном. Массаж оказывает стимулирующий эффект и может замедлить процесс засыпания.
- НЕ используйте массажер когда находитесь в постели.
- Данный массажер не должен использоваться лицом, страдающим от любого физического недуга, который может ограничить возможности пользователя в доступе к элементам управления или тем кто имеет недостаточную чувствительность в нижней части тела.
- Данный массажер не должен использоваться детьми или инвалидами без присмотра взрослых.

Порядок эксплуатации

1. Вставьте вилку в розетку переменного тока 100 - 240 В. При этом массажер перейдет в режим ожидания
2. При нажатии на кнопку “Питание” один раз активируется режим разминающего массажа шиацу.
3. Последовательное нажатие на кнопку “Шиацу” изменяет интенсивность массажа в последовательности: низкая, высокая и выключение шиацу массажа.
4. При нажатии на кнопку “Нагрев” активируется функция тепловой терапии. При этом массажные головки начинают светиться желтым цветом. Подождите несколько минут для того чтобы массажные головки полностью прогрелись.
5. При нажатии на кнопку “Вибрация” активируется функция вибрационного воздействия.
6. Для окончания массажа нажмите кнопку “Питание” и затем обесточьте массажер от сети и отсоедините разъем адаптера питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более интенсивного массажа, поместите руки в захваты массажера и осторожно потяните вперед.

Ограничения гарантии

1. Данная гарантия не подлежит передаче.
2. Настоящая гарантия действительна только если массажер был куплен у официального дистрибьютора или дилера компании OGAWA.
3. Предъявление доказательства покупки (оригинал платежной квитанции, накладной или чека) является обязательным для всех гарантийных ремонтов.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничены общей продолжительностью срока, указанного в гарантийном талоне.
5. Повреждения массажера, возникшие в результате неправильного его использования, неправильной перевозки или хранения, а также внесения изменений в конструкцию и неквалифицированного ремонта не распространяются на эту гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не входящие в состав массажера.
7. Гарантия не действует на массажеры, используемые для аренды, офисной, коммерческой, выставочной эксплуатации или для других целей, кроме домашнего использования.
8. Все услуги, предусмотренные настоящей гарантией должны быть выполнены только с согласования компании OGAWA и осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.


Спецификация

Наименование	OGAWA LUNEX Touch
Модель	OL 0838
Напряжение питания	АС 100 - 240 В, 50 Гц
Вых. напр. адаптера	12 В, 2 А
Мощность	24 Вт
Автоматический таймер	15 минут
Вес	1,49 кг
Габаритные размеры	470 (Д) x 320 (Ш) x 160 (В) мм

Кнопки управления



Состав массажера

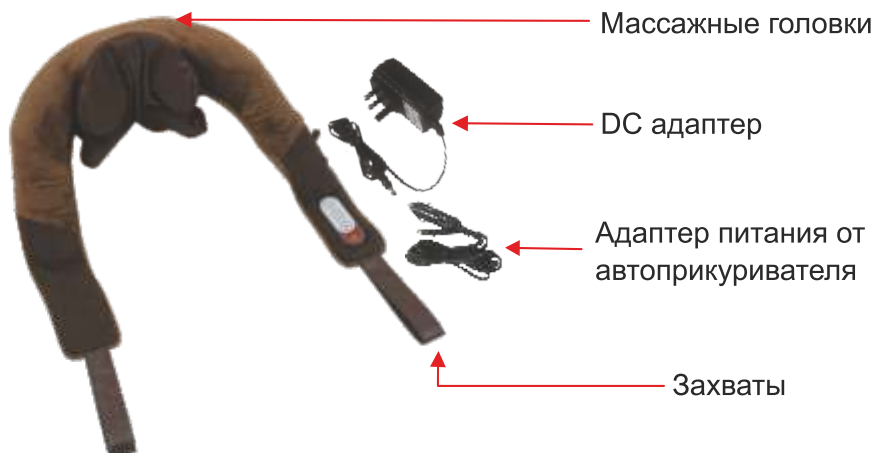

Хранение и обслуживание

Очистка

Предостережение:

Несоблюдение этих инструкций может привести к поражению электрическим током или ожогам.

- Всегда отключайте массажер от сети перед чисткой.
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.
- Дайте массажеру остыть в достаточной мере перед чисткой.
- Протирайте панель управления и шнур питания сухой тканью.
- Никогда не погружайте массажер в воду.
- Никогда не используйте для чистки абразивные чистящие средства, спирт, бензин или ацетон.

Порядок хранения

Предостережение:

Несоблюдение этих инструкций может привести к сбоям в работе массажера.

- Храните массажер в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Никогда не кладите тяжелые предметы на массажер.

Контактная информация



MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : +603-5125 4286
Fax: +603-5121 4386



HONG KONG, CHINA
OGAWA Health Care International (HK) Ltd
Room 3&5, 7/F International Trade Centre
11-19 Sha Tsui Road
Tsuen Wan
Hong Kong
Tel :+85 2 2428 8823
Fax:+85 2 2410 0119



SINGAPORE
OGAWA Health-Care Pte Ltd
17 Kaki Bukit Road 2
K. B. Warehouse Complex
Singapore 417846
Tel : +065-6846 8588
Fax: +065-6846 7677



SHANGHAI, CHINA
OGAWA (SHANGHAI)
Health-Care Equipment Co. Ltd
Block B 2903, Dazhong Jinrong Plaza
1023 West Yan'an Road, Zhangning
District,
Shanghai, China P.R.C. 200050
Tel : +86 021-6212 0981
Fax: +86 021-6212 2856



AUSTRALIA
OGAWA International (AUST) Pty Ltd
3/26, Day Street North
Silverwater, 2128 NSW
Sydney, Australia
Tel : +612-9666 8883
Fax: +612-9666 8886



VIETNAM
OGAWA Vietnam
171 Nguyen Thi Thap Street
Tan Phu Ward
Dist 7
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 8 3775 3093 / 3775 3094
Fax: +84 8 3775 3095



INDONESIA
PT Healthy World
Lodan Center Block O No 20
Jalan Lodan Raya No 2
Jakarta Utara 14430
Tel : +62 21-6983 1123
Fax: +62 21-6983 1124



Myanmar
Medi Myanmar Group Ltd
No. 46, Pyay Road, 6 ½ mile
Hlaing Township, Yangon 11051
Myanmar
Tel : +95 1-538648
Fax: +95 1-538686



Saudi Arabia
Bed House Est For Trading
Al Mazro Building, Al Hasan Bin Ali
Street Rowdah-2, P.O.Box 85987
Riyadh 11612
Kingdom of Saudi Arabia
Tel : +966 1-4602501
Fax: +966 1-4602577



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО Технологии Здоровья Релакса
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
Российская Федерация
тел: +7 495-789-91-74
факс: +7 495-983-34-78



Ogawa is grateful
to have received
these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS

Ogawa Wellness Hubs : • Malaysia • Singapore • China • Hong Kong • Indonesia • Vietnam • Myanmar
• Saudi Arabia • India • Philippines • Taiwan • Turkey • Russia • Pakistan
• United Kingdom • France • Canada