



SuperGo

Массажер для ног



Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажера для ног Ergonova SuperGo! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Массажер разработан профессиональной командой разработчиков. Элегантный дизайн, глянцевое покрытие, небольшой вес и размер.
2. Массажер позволит наслаждаться профессиональным массажем ног и ступней в любое время. Эргономичный дизайн, повторяющий все изгибы человеческой ноги.
3. Встроенная защита от перегрева отключит устройство при любых признаках перегрева устройства или перегрузке сети.
4. Массажные техники разминания, шиацу, воздушно-компресссионный массаж ног и стоп и т.д.
5. Уникальный массаж икр и функция заботы о стопах.
6. Съёмный и стираемый тканевый чехол.
7. Чувствительная сенсорная панель.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПЕРЕД МАССАЖЕМ	5
УПРАВЛЕНИЕ	6
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать о правильных методах использования массажера.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если только им не был обеспечен надзор или предоставлены инструкции касательно использования изделия лицами, ответственными за их безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с массажером.
- В массажере присутствует функция прогрева. Личности, нечувствительные к высокой температуре, должны быть осторожны во время использования изделия.
- Если кабель питания поврежден, необходимо обратиться к производителю, сервисный центр или специалисту по ремонту кресел для его замены.
- При работе с устройством не используйте острые предметы. Запрещается использовать массажер, если обивка повреждена. Пожалуйста, обратитесь к производителю или в сервисный центр.
- Пожалуйста, не забывайте отключать прибор от сети после использования и перед чисткой.
- Не накрывайте массажер во время работы, он может перегреться и перестать работать.
- Если ваше самочувствие ухудшилось, прекратите использование массажера.
- Если появились признаки неисправности устройства, немедленно отключите его от сети и свяжитесь с сервисным центром.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в любые отверстия массажера.
- Не прикасайтесь влажными руками к массажеру.
- Не проливайте воду или другие жидкости на массажер.
- После работы выключите массажер и выньте вилку из розетки.
- Не используйте прибор для самолечения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

2. Подходящие условия для работы с массажером

- Пожалуйста, не используйте массажер в загрязненных помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью - например, в ванной комнате.
- Не используйте массажер в помещении с температурой 40°C или выше. Не подвергайте массажер воздействию нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство при температуре окружающей среды ниже 5 °C.
- Берегите массажер от прямых солнечных лучей. Длительное пребывание на солнце может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
- При транспортировке устройства в холодное время года не включайте его немедленно - оно должно постоять не менее 1 часа и принять комнатную температуру.

3. Категории людей, которым может не подойти массажер

- Люди, проходящие в настоящее время лечение или перенесшие операции.
- Люди, страдающие высоким артериальным давлением, заболеваниями сердца, церебральным атеросклерозом, церебральным тромбозом.
- Имеющие злокачественные опухоли.
- Беременные женщины, или женщины, претерпевающие менструальный цикл.
- Люди, страдающие от остеопороза.
- С кардиостимуляторами или другими имплантируемыми медицинскими устройствами.
- С другими острыми заболеваниями.




Используйте этот массажер 1-2 раза в день с продолжительностью 5-10 минут, чтобы убрать мышечную усталость и улучшить кровообращение.

Также используйте его за 5-15 минут до сна, чтобы улучшить качество сна.

Примечание

- Не засыпайте во время массажа.
- Пожалуйста, не пользуйтесь массажером в состоянии алкогольного опьянения или при плохом самочувствии.
- Рекомендуемое время массажа не более 30 минут, включенный подогрев ног не более 2 часов.
- Не используйте массажер при наличии повреждений в его конструкции.
- Не используйте массажер за час до или после еды.
- При транспортировке кресла в холодное время года не включайте его немедленно - кресло должно постоять и принять комнатную температуру не менее 1 часа.

Иллюстрация по использованию

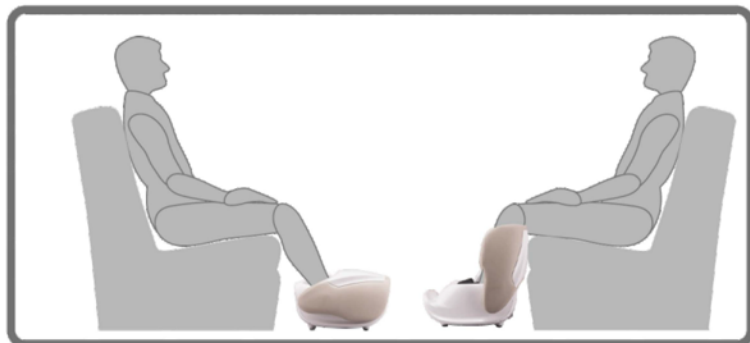

ПЕРЕД МАССАЖЕМ

1. Поместите массажер на чистый ровный пол и проверьте его целостность.
2. Сначала вставьте один конец кабеля питания в разъем на массажере, другой конец-вилку питания в розетку. Световой индикатор начнет мигать и массажер перейдет в режим ожидания. Сядьте на стул или кресло, и опустите ноги в массажер. (примечание: запрещается использовать в положении стоя).
3. В зависимости от потребностей, вы можете сложить или развернуть блок для голеней. В сложенном состоянии - массируются только стопы, в развернутом - стопы и голени.
4. Верхняя панель управления недействительна, когда подушка в сложенном виде, нижняя панель управления недействительна, когда подушка в разложенном виде.
5. Если вы хотите сложить/разложить подушку, нажмите на кнопку "Вкл/выкл", дождитесь остановки массажера и поменяйте положение. Затем заново включите массажер.
6. По окончании массажа массажер остановит работу и вернется в режим ожидания.



ВНИМАНИЕ

По окончании воздушно-компрессионного массажа голеней подождите 1 минуту до тех пор, пока не спустится весь воздух, а затем сложите подушку.

Советы:

- После массажа рекомендуется выпить кружку теплой воды.
- Для предотвращения случайного запуска массажера детьми, несчастных случаев или возгорания устройства, рекомендуется отключать кабель питания от розетки каждый раз по окончании работы.

УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки



Вкл Выкл:

Нажмите кнопку на передней панели массажера, чтобы включить массажер и запустить автоматическую программу массажа.



Прогрев:

Нажмите кнопку, чтобы выключить или включить функцию прогрева ног.



Мощность:

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать интенсивность воздушно-компрессионного массажа. Три уровня интенсивности (низкая, средняя и высокая) отличаются по цветам от голубого до красного. Длительное нажатие на кнопку в течение 1 секунды отключает воздушно-компрессионный массаж.



Скрабирующий массаж:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить скрабирующий массаж ног; длительное нажатие кнопки в течение 1 секунды отключит функцию и переключится на программу автоматического ухода за стопами.



Вибрирующий массаж:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить вибрирующий массаж.



Массаж голеней:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию массажа ног. Длительное нажатие кнопки в течение одной секунды, отключает функцию массажа ног и переключается на режим "Мягкий воздушнокомпрессионный массаж" (эта функция недоступна, когда воздушная подушка сложена).

Панель управления



Сенсорная панель



Сенсорная панель



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

- Храните массажер в чехле в сухом, хорошо вентилируемом и прохладном месте.
- Не скручивайте кабель питания.
- Не используйте массажер на весу.
- Избегайте попадания на массажер острых предметов.
- Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры.
- Храните массажер в чистом месте, выдали от прямых солнечных лучей и повышенной влажности.
- Если массажер не используется в течение длительного времени, пожалуйста, поместите его в чехол или оберните тканью, чтобы защитить от попадания пыли.

Чистка

- Перед чисткой отключите питание и вытащите вилку из розетки.
- Рекомендуется производить чистку поверхности сухой тканью. Не используйте чистящие средства, в состав которых входят растворители или бензолы.



ВНИМАНИЕ

Массажер оснащен системой защиты от перегрева. При достижении температуры максимально допустимого значения, устройство автоматически выключится. Пожалуйста, вытащите кабель из розетки и дождитесь полного остывания устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если произошло нарушение работы массажера, не связанное с нижеперчисленными причинами, прекратите использование массажного кресла и свяжитесь с сервисным центром/продавцом для диагностики и ремонта массажного кресла.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не включается	<ol style="list-style-type: none">1. Кабель питания не вставлен в розетку или в разъем в массажере2. Не нажата кнопка Вкл/Выкл на сенсорной панели	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте все разъемы2. Нажмите кнопку Вкл/ Выкл
Массаж прервался	<ol style="list-style-type: none">1. Проблемы с подачей питания2. Массаж закончился (15 минут)3. Перегрев из-за длительной работы4. Приложена слишком большая сила, тормозящая массажные элементы	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте надежность соединений и подачу питания2. Нажмите на кнопку Вкл/ Выкл3. Дайте массажеру остыть, после чего включите повторно4. Расслабьте стопы, уменьшите давление на массажер

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажер должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье). За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Массажер для ног
Модель	SuperGo
Напряжение	220 В, 50-60 Гц
Номинальное напряжение	24 В
Номинальная мощность	55 Вт
Время работы	15 минут

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Цвет и дизайн данной модели может отличаться от изображений в инструкции.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае



Designed by Ergonova Germany

www.ergonova.ru

